




AUTOCLAVE DE PAILLASSE 15 litres

Autoclave, capacité : 15 litres RT – 41

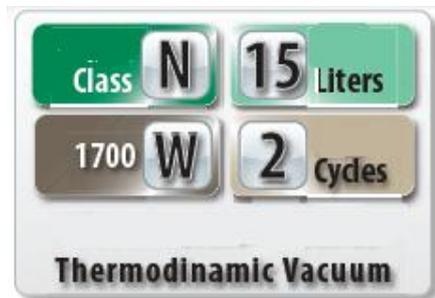

Autoclave pour la stérilisation d'instruments en vrac et ensachés avec séchage.

2 cycles de stérilisation: 134 ° C ou 121 ° C. **classe N**

Cycle 1	121°C	sans sachet	30 min
Cycle 2	134 °C	sous sachet	20 min

Toutes les étapes de préchauffage, la stérilisation et le cycle de séchage sont automatiques.

Fermeture de sécurité: système de fermeture avec un pivot sécurité.

Méthode thermodynamique pour chasser les bulles d'air «froid».

La chambre de stérilisation est entièrement en acier **inoxydable** chauffée par une résistance enveloppante qui garantit une distribution uniforme de la chaleur.

Certifié CE.

Livré : avec 4 plateaux
clé pour extraction des plateaux

Mesures externes:

Largeur 442 mm

Hauteur 385 mm

Profondeur 500 mm

Mesures internes:

Diamètre 243 mm (chambre)

Profondeur 320 mm

Puissance : 1.3 KW

Tension : 230V-50/60

Poids : 35 kg

