




## AUTOCLAVE DE PAILLASSE 18 litres

**Autoclave, capacité : 18 litres RT – 42**

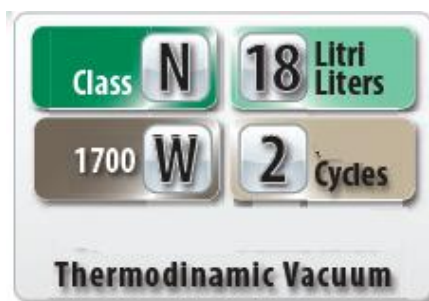

**Autoclave** pour la stérilisation d'instruments en vrac et ensachés avec séchage.

2 cycles de stérilisation: 134 ° C ou 121 ° C. **classe N**

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| Cycle 1 | 121°C  | sans sachet | 30 min |
| Cycle 2 | 134 °C | sous sachet | 20 min |

Toutes les étapes de préchauffage, la stérilisation et le cycle de séchage sont automatiques.

Fermeture de sécurité: système de fermeture avec un pivot sécurité.

Méthode thermodynamique pour chasser les bulles d'air «froid».

La chambre de stérilisation est entièrement en acier **inoxydable** chauffée par une résistance enveloppante qui garantit une distribution uniforme de la chaleur.

Certifié CE.

Livré : avec 4 plateaux  
clé pour extraction des plateaux

### Mesures externes:

Largeur 442 mm

Hauteur 385 mm

Profondeur 500 mm

### Mesures internes:

Diamètre 243 mm (chambre)

Profondeur 400 mm

Puissance : 1.3 KW

Tension : 230V-50/60

Poids : 35 kg

