




AUTOCLAVE DE PAILLASSE 15 litres

Autoclave, capacité : 15 litres AVEC vide RT – 45

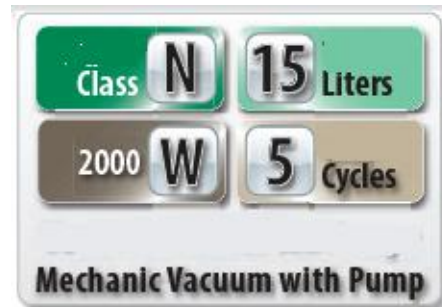

Autoclave à vapeur d'eau pour la stérilisation d'instruments en vrac et ensachés avec séchage.
5 cycles de stérilisation: possibilité de sélectionner le cycle à **134° C** ou à **121° C**. **classe N**

Cycle 1	121°C	sans sachet	38 min
Cycle 2	121 °C	sous sachet	39 min
Cycle 3	134 °C	sans sachet	28 min
Cycle 4	134 °C	sous sachet	33 min
Cycle 5	134 °C	flash	18 min

Allumage automatique, avec position de "veille" à 80° C et arrêt automatique de la machine après une heure d'inactivité.

Gestion complètement informatisée pour le monitoring de toutes les fonctions opérationnelles en automatique et en autodiagnostic sur les composants.

Avec la machine chaude les temps de préchauffage se réduisent de 20%.

Vide thermodynamique à dépression forcée: il garantit l'expulsion totale des poches d'air froid créant ainsi des conditions optimales de stérilité et assurant un séchage parfait.

Triple fermeture sur la porte:

Chambre en acier inox d'une capacité de 15 l, réchauffée uniformément par des résistances enveloppantes.

Remplissage automatique de l'eau: une pompe à membrane permet le remplissage et s'arrête automatiquement lorsque le niveau maximum est atteint.

Certifié CE.

Livré : avec 4 plateaux
clé pour extraction des plateaux

Mesures externes:

Largeur 442 mm
Hauteur 385 mm
Profondeur 500 mm

Mesures internes:

Diamètre 243 mm (chambre)
Profondeur 320 mm

Puissance : 2 KW
Tension : 230V-50/60
Poids : 49 kg