




## AUTOCLAVE DE PAILLASSE 15 litres

Autoclave, capacité : 15 litres AVEC vide et AVEC imprimante. RT – 91



CE  
0434

Built-in printer

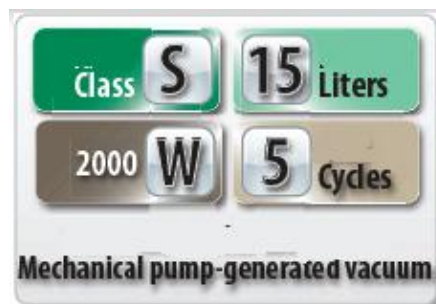

**Autoclave à cycles rapides complètement** informatisé pour la stérilisation d'instruments en vrac et ensachés avec séchage.

5 cycles de stérilisation: possibilité de sélectionner le cycle à **134° C** ou à **121° C**. **classe S**

Cycle 1	121°C	sans sachet	49 min
Cycle 2	121 °C	sous sachet	52 min
Cycle 3	134 °C	sans sachet	38 min
Cycle 4	134 °C	sous sachet	43 min
Cycle 5	134 °C	flash	23 min

Méthode de préchauffage rapide.

5 cycles de stérilisation 121 ° C - 134 ° C et un cycle "flash rapide (16 minutes au total).

Vide thermodynamiques de forçage. Sèche-linge.

Fermeture de la porte avec des électro-aimants.

Chambre acier inoxydable.

4 plateaux

Deux réservoirs d'eau.


Tailles standard et commandes « soft ».

l'imprimante intégrée

Certifié CE.

Livré : avec 4 plateaux

clé pour extraction des plateaux

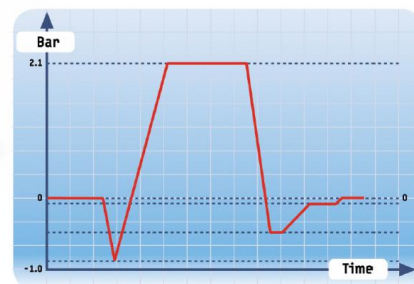

### Mesures externes:

Largeur 442 mm

Hauteur 385 mm

Profondeur 500 mm

### Mesures internes:

Diamètre 243 mm (chambre)

Profondeur 320 mm

Puissance : 2 KW

Tension : 230V-50/60

Poids : 49 kg