




AUTOCLAVE DE PAILLASSE 15 litres

Autoclave 15 litres AVEC vide fractionné et AVEC imprimante. RT – 92

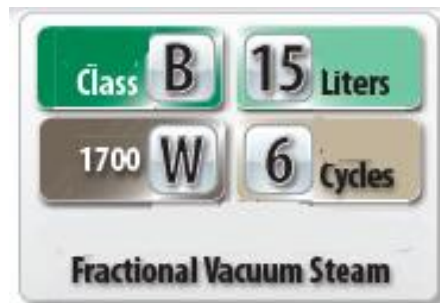

Autoclave à cycles rapides complètement informatisé pour la stérilisation d'instruments en vrac et ensachés avec séchage.

6 cycles de stérilisation: possibilité de sélectionner le cycle à **134° C** ou à **121° C. classe B**

Cycle 1	121°C	sans sachet	49 - 59 min
Cycle 2	121 °C	sous sachet	60 - 70min
Cycle 3	134 °C	sans sachet	36 - 46 min
Cycle 4	134 °C	sous sachet	47 - 57 min
Cycle 5	134 °C	flash	31 – 41 min
Cycle 6	134 °C	prion	62 - 72 min

CERTIFICATION DU CYCLE DE STERILISATION L'imprimante incorporée dans l'autoclave permet d'obtenir un document attestant que la stérilisation a bien été effectuée avec la date, l'heure et d'autres paramètres concernant l'opération.

VALIDATION BIOLOGIQUE DU CYCLE A la demande on peut livrer avec un incubateur pour tester la validité biologique par ampoules avec spores. Solution unique au monde qui assure rationalité, ergonomie et sécurité.

Méthode de préchauffage rapide.

6 cycles de stérilisation 121 ° C - 134 ° C et un cycle "flash rapide (16 minutes au total).

Vide thermodynamiques de forçage. Séchage fractionné.

Fermeture de la porte avec des électro-aimants.

Chambre acier inoxydable. 4 plateaux

Deux réservoirs d'eau.

Tailles standard et commandes « soft ».

Imprimante intégrée Certifié CE.

Livré : avec 4 plateaux clé pour extraction des plateaux

Mesures externes:

Largeur 442 mm

Hauteur 385 mm

Profondeur 500 mm

Mesures internes:

Diamètre 243 mm (chambre)

Profondeur 320 mm

Puissance : 1.00 KW

Tension : 230V-50/60

Poids : 49 kg