



RHESUSCOPE

REF 10093

RHÉSUSCOPE ORIENTABLE SUR PIED

Rhésuscope orientable sur pied


Une face de lecture en opaline blanche de 305 * 77 mm

Chauffage et éclairage par une lampe linolite d'une puissance de 40 W

Température sur la plaque est de +/- 45°C

Dimensions (L x l x h) : 360 * 120 * 165 mm

Poids : 2,5 kg

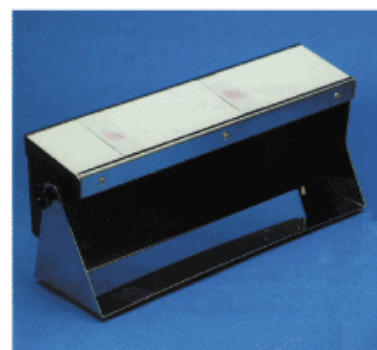

REF 10121

■ Rhésusopes

- Pour toute technique d'identification par agglutination.
- Les rhésusopes favorisent la formation et la visualisation des agglutinations. Ils sont proposés avec 1 ou 2 faces de travail.



- L'éclairage et le chauffage sont assurés par :
 - un tube linolite de 40 W/220 V (pour le modèle 1 face),
 - 2 ampoules de 40 W/220 V (pour le modèle 2 faces).
- L'ensemble est fixé sur un axe central pour une agitation légère par basculement.
- Livré avec un cordon muni d'un interrupteur.
- Livré avec plaque opaline.
- Pour usage général de laboratoire.

Dimension de la plaque opaline: 310 * 160 * 2.7 mm