



TABLE D'ANESTHESIE

Description :

Major International Appareil d'anesthésie 2 gaz (O₂ N₂O) sur chariot an acier inoxydable.

Complet avec :

- 2 tiroirs et 1 étagère pour le monitoring
- 1 boîte débitmètre à 2 gaz (O₂-N₂O)
- 4 roues antistatiques
- 4 Mt. tuyau alimentation oxygène
- 4 Mt. tuyau alimentation N₂O
- 1 circuit patient silicone pour ventilation manuelle avec ballon de 3 l.
- 1 Siaretex base pour liaison rapide d'un évaporateur compatible avec Selectatec/Interlock.
- 1 évaporateur Halothane compatible Selectatec/Interlock avec système de remplissage à clé
- 1 bras porte tuyaux avec 2 articulations et support pour rail 30x10
-
- 1 manuel d'utilisation

Dimensions : cm. 78x72x167 h. 100 Kg.

Option :

Rotamètre Air/O₂/N₂O
CO₂ absorber
Ventilateur Alpha-Delta
Humidificateur

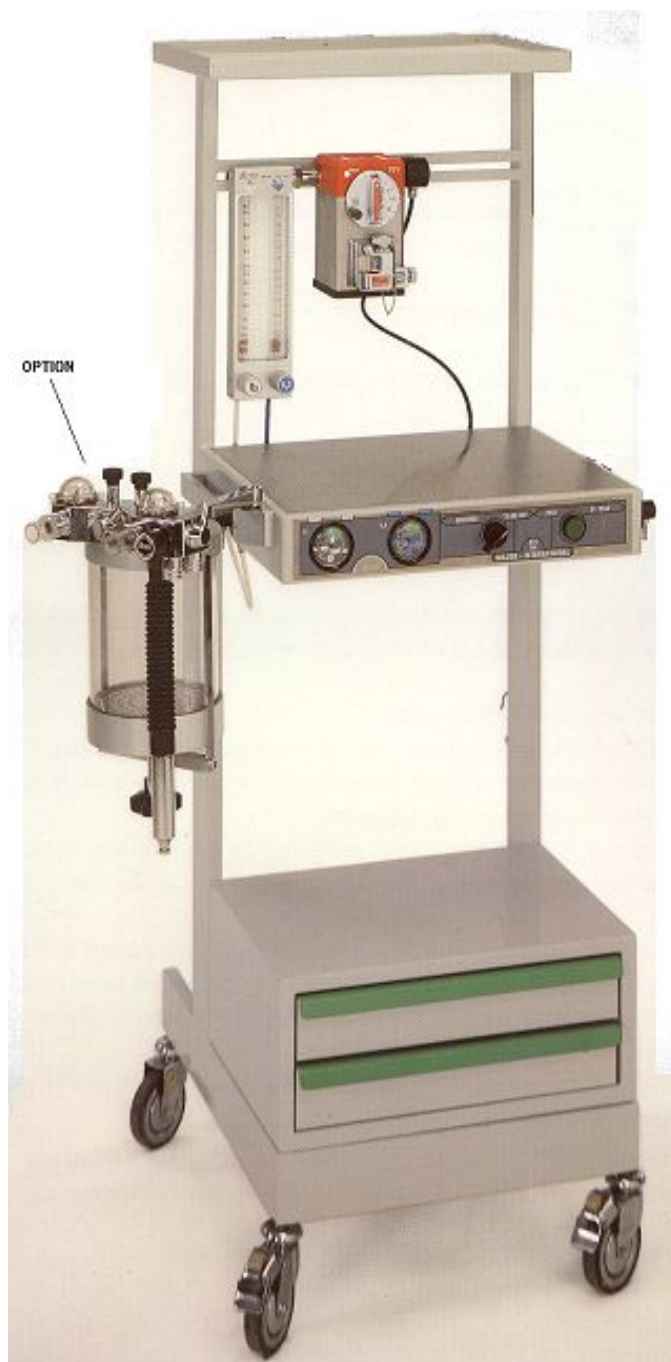




TABLE D'ANESTHESIE

OM 394 MAJOR INTERNATIONAL Anaesthesia Machine

Application	Gaseous anesthesia			
Type	on trolley with antistatic wheels (two of them with breaks)			
Medical gases	Oxygen - Nitrous Oxide			
Mixer	Flowmeter box with 2 glass rotameters with double scale			
Oxygen rotameter	Scale 0.2 - 12 l/min. Resolution: 0.1 l/min up to 1 l/min and 0.5 l/min up to 12 l/min			
Nitrous Oxide rotameter	Scale 0.2 - 12 l/min. Resolution: 0.1 l/min up to 1 l/min and 0.5 l/min up to 12 l/min			
Pressure of medical gas supply	3.5 bar +/- 0.75			
Control manometers	Scale 0 - 6 bar / 0 - 80 Psi (one for each gas) on the input pressure			
Safety devices	AGAINST HYPOXIC MIXTURES MIX-LIFE. Minimum O ₂ concentration 25 % on the Nitrous Oxide mixtures			
	LACK OF OXYGEN CUT-OFF. With audible and displayed alarm and block of the Nitrous Oxide delivery			
	EXIT OVER PRESSURE Scaled discharge valve precalibrated at 0.8 bar for the protection of the glass rotameters			
Emergency Oxygen by-pass	by push-button on the front panel. Flow of 60 liters/min.			
Fresh gas exits	N. 2 with lever deviator on the front panel			
Auxiliary plugs	N. 2 oxygen			
Accessories bar	N. 2 on the lateral sides, dimensions 30x10 mm each			
Cylinder holders	N. 2 with setting springs and lower rubber stoppers for 10.7lt. cylinders			
Vaporizer support	With screws on horizontal guide bar (OPTIONAL SIARETEX device for quick connection Selectatek compatible)			
Vaporizer FLUO-HALOTANet	Selectatec compatible with key filler			
Standard accessories	Support for patient circuit arm and support for CO ₂ absorber Upper monitor tray Two accessories drawers and tray Nr.1 workshelf n.1 O ₂ supply tube 4 mt (code G60005100) n.1 N ₂ O supply tube 4 mt (code G60006100) TO and FRO Circuit, adult (code. 002627EN)			
Dimensions	55 x 145 x 54 (L x H x D) cm			
Weight	50 Kg			
Norms conformity	Typology	Internationals	Nationals	Internation.
	Generals	IEC 601-1	CEI 62-5	
	Anesthesia machines	IEC 601-2-13	CEI 62-21	ISO 5358
Environmental conditions	Temperature from 10 to 40°C Humidity from 10 to 90% non condensing			